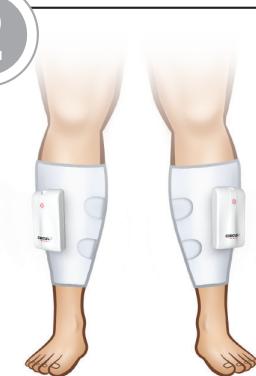


**1**

Left Leg Pictured

**2****3****4**

### CALF CUFF APPLICATION

Wrap the cuff around the calf and secure the Velcro to hold it in place  
Make sure the wrap is snug, but not too tight

When both wraps are secured on your legs. They should look like the picture above.

### TURNING THE DEVICE ON

When the wraps are secured on your legs PRESS and HOLD the WHITE power button for about a second until the light is illuminated on each unit.

### USING THE DEVICE

Don't be startled. The device will make a "humming" sound when inflating and squeezing your leg. **THIS IS NORMAL.** The wraps will inflate once a minute. If you FEEL air releasing around the legs, this is normal. This is a function of the device to keep your legs cool.

### PUMP ALARMS

#### What to do if the Pump Alarms

Don't worry, the alarms are there to insure the units are operating correctly.



#### BATTERY CRITICAL

If battery voltage drops below a critical level, cycling stops, audible alarm will sound, and UNIT WILL FLASH RED. The Alarm will continue for 30 seconds and automatically turn the unit OFF.



#### LOW PRESSURE OR LEAK

If the ALARM sounds and the BLUE LED and right light is flashing, the pressure is too LOW.



Make sure wrap is attached snugly to the leg. Turn the Unit OFF and then back ON to reset the alarm.

If the unit continues to ALARM after this step, DO NOT try to fix the device.

Call Customer Service for a replacement unit at 877-475-7050.

### POWER

 If the power button is SOLID GREEN the units are fully charged and operational.

 If both units are plugged in the power button will FLASH GREEN and the batteries WILL charge at the same time.

 If the power button is YELLOW plug in the power cord immediately into an electrical outlet.

 If battery voltage drops below a critical level, cycling stops, audible alarm will sound, and UNIT WILL FLASH RED. The Alarm will continue for 30 seconds and automatically turn the unit OFF.



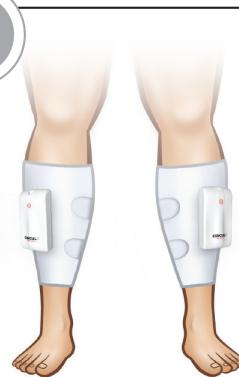
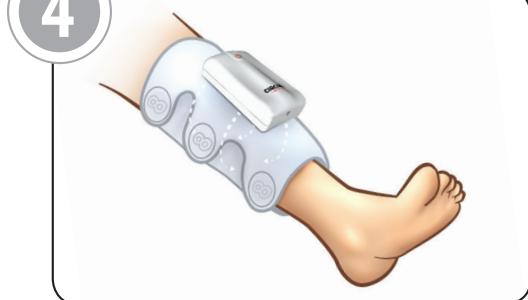
**PLEASE DO NOT CONTACT YOUR PHYSICIAN OR SURGICAL FACILITY FOR ANY QUESTIONS REGARDING THIS DEVICE.**

**CALL Customer Service: (800) 604-2487**

**PLEASE VISIT: [www.Ortho8.com](http://www.Ortho8.com) for the use of this device.**

**1**

Pierna Izquierda

**2****3****4**

### COLOCACIÓN DE LA MANGA PARA PANTORRILLAS

Envuelva la pantorrilla con la manga y cierre el velcro para mantenerla en su lugar. Asegúrese de que la manga esté bien ajustada, pero no demasiado.

Una vez colocadas las mangas en ambas piernas, se deberán ver como en la imagen de arriba.

### ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

Cuando tenga puestas las mangas en las piernas MANTENGA PRESIONADO el botón de encendido BLANCO durante aproximadamente un segundo hasta que se ilumine la luz de cada unidad.

### USO DEL DISPOSITIVO

No se asuste. El dispositivo hará un "zumbido" al inflarse y comprimir su pierna. **ES NORMAL.** Las mangas se inflarán cada un minuto. Si SIENTE aire alrededor de las piernas, es normal. Es una función del dispositivo para mantener sus piernas frescas.

### ALARMAS DE LA BOMBA

#### Qué hacer si se enciende la alarma de la bomba

No se preocupe, la función de las alarmas es garantizar que las unidades funcionan correctamente.



#### BATERÍA CRÍTICA

Si el nivel de la batería está por debajo del nivel crítico, el ciclismo se detiene, sonará una alarma, y UNIDAD PARPADERÁ EN ROJO. La alarma continuara sonando por 30 segundos y la unidad se apagará automáticamente.



#### PRESIÓN BAJA O FUGA

Si suena la alarma y el LED azul parpadea, la presión es demasiado baja. Asegúrese de que la manga queda bien ajustada a la pierna. APAGUE la unidad y vuelva a ENCENDERLA para reiniciar la alarma.



Si la unidad sigue siendo ALARMA después de este paso, NO intente arreglar el dispositivo. Llame a Atención al cliente al 877-475-7050 para solicitar una unidad de reemplazo.

**SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE ESTE DISPOSITIVO, NO CONTACTE A SU MÉDICO O CENTRO QUIRÚRGICO.**

### ENCENDIDO



Si el botón de encendido se ilumina VERDE sólido, las unidades están completamente cargadas y en operacional.



Si ambas unidades están enchufadas el botón de encendido va a parpadear VERDE y cargarán las baterías al mismo tiempo.



Si el botón de encendido ilumina AMARILLO, conecte el cable de alimentación inmediatamente al tomacorriente.



Si el voltaje de la batería cae por debajo de un nivel crítico, el ciclismo se detiene, una alarma sonara, y la UNIDAD VA A PARPADERAR ROJO. La alarma continuará durante 30 segundos y automáticamente apaga la unidad.



**LLAME a Atención al cliente: 800-604-2487**

VISITE: [www.Ortho8.com](http://www.Ortho8.com) para uso de este dispositivo.