

THE GIFT OF
CONFIDENCE



RUNDE ELLER
ANATOMISKE?

FIND DET SOM PASSER
TIL DIN KROP

DIN GUIDE TIL
BRYSTFORSTØRRELSE

DINE BEHOV I FOKUS

10 SPØRGSMÅL
TIL KIRURGEN

*«Jeg har ønsket det lige så
længe jeg kan huske»*

LÆS OM ANDRE KVINDERS ERFARINGER



En del af dig.

DINE DRØMME og behov er opnåelige. Du har mulighed for at fremstå som den person du altid har set for dig. Som vi ser det, handler en brystforstørrelse ikke om noget nyt eller anderledes. Det handler om, hvordan du ønsker at fremstå og om at opfylde dine drømme.

Vi ønsker at sikre at du får al den information du behøver både inden du besøger klinikken, inden selve indgrebet og i tiden efter operationen. I denne brochure har vi samlet information i forhold til hvilke valg du har og hvilke muligheder Mentor tilbyder inden din brystforstørrelse.

Indhold

En del af dig.....	3
Dine drømme i fokus.....	5
Tro på dig selv.....	6
Dine forudsætninger.....	9
Rejsen med Mentor.....	10
Hvilke spørgsmål bør du stille?.....	14
Vores implantater.....	16
Din sikkerhed i fokus.....	18
Brystets anatomi.....	20
Dine alternativer.....	21
Historier og oplevelser.....	22
Studier.....	24
10 grunde til at vælge Mentor.....	26
Kilder og kommentarer.....	28



Dine drømme
i fokus

Tro på dig selv

VI ER stolte af at 98% af de kvinder, som har valgt Mentors brystimplantater, fortæller at de ville vælge det samme igen¹. Målet med vores produkter er at hjælpe kvinder med at opnå en bedre livskvalitet og selvfølelse. Uanset hvilken grund du har til at vælge operationen, ønsker vi at hjælpe dig til at føle dig tryk ved dine beslutninger.

En indre tryghed.

Hvordan kvinder opfatter bryster, har en påvist kobling til selvfølelse og hvordan kvinder værdsætter sig selv.² Det behøver ikke at gælde for alle som vælger en brystforstørrelse, men det er vigtigt at huske at det er dine grunde som skal være afgørende og at du føler dig tryk.

Undersøgelser viser at 91% af kvinder er utilfredse med deres krop.³ Der er selvfølgelig flere årsager til dette. Som vi ser det, er det netop det som er pointen. Der er forskellige årsager og derfor også forskellige veje at gå. Du må gøre det som er rigtigt for dig.





Dine forudsætninger.

DER ER FORSKELLIGE ÅRSAGER til at vælge en brystforstørrelse. Akkurat som årsagerne kan være forskellige, så er vores kroppe det også. Vi er født med forskellige forudsætninger som igen former vores valg og resultater.

Valg af klinik og kirurg

Det er vigtigt at finde en klinik og en plastikkirurg som er lydhør overfor dine ønsker i forbindelse med en brystforstørrelse. Du skal føle dig tryk ved at kirurgen tager hensyn til din kropsform, dit helbred og dine fysiske forudsætninger.

Sommetider er det nemt at se sig blind på andres resultater. At se på billeder af andre eller få en 3D-simulering, kan derfor være en hjælp til at bestemme hvilken type implantat som passer til dig og dine ønsker.

Rigtigt for dig

Hvad enten det handler om at ændre brysternes form, at genopbygge brysterne efter amning eller udligne asymmetrier i bryststørrelsen, findes der idag mange muligheder. Vær ærlig overfor dig selv, så du finder den rigtige løsning for dig.

Undersøg de muligheder du har, så du bliver tryk ved beslutningen om at gennemgå en brystoperation. Det er vigtigt at finde en klinik, hvor du føler dig komfortabel med at stille dine spørgsmål.

Før operationen.

Beslutningen om en brystoperation afhænger af valgene som tages undervejs og af klinikken, du går til. Uanset hvilke valg du tager, er det altid en fordel at være godt forberedt for at kunne stille de relevante spørgsmål

Valg af klinik

Det kan være en fordel at læse om andres erfaringer og lytte til anbefalinger fra venner og bekendte når du vælger klinik. Det kan være en god start for at få et overblik over hvilke klinikker du har at vælge mellem. Det vigtigste er at vælge en klinik som føles rigtig for lige præcis dig og at du stoler på kirurgen, de mennesker som du møder på klinikken og på det, de har at tilbyde. Det er din beslutning og du skal føle at hele processen er i overensstemmelse med dine behov og ønsker.

Konsultationen

Konsultationen med kirurgen kan variere fra klinik til klinik. Uanset hvor du henvender dig, er målet at kirurgen skal kunne fortælle dig alt hvad du behøver at vide om en brystoperation og at du får mulighed for at stille de spørgsmål, som du har. Ved konsultationen er det vigtigt at snakke åbent om dine ønsker, forventninger og forudsætninger og om de muligheder du har for bl.a. placering og valg af implantater.

Din beslutning

Når du har besøgt en eller flere klinikker, er det tid til at bestille en operationstid. Er du stadig usikker på hvilken klinik du skal vælge eller hvis du har flere spørgsmål, bør du snakke med kirurgen eller klinikken igen, før du træffer dit valg. Tag dig god tid til at tænke valget igennem – så du føler dig tryk ved din beslutning

Før operationen

Før operationen vil du modtage information om klinikens retningslinjer for bl.a. mad, drikke, rygning, medicin og personlig hygiejne før operationen og hvad du skal have med på selve operationsdagen. Du vil også få information om anæstesi og rekonvalescens efter operationen.

På side 15 kan du læse nogle eksempler på spørgsmål, som du kan stille til kirurgen.



Under operationen.

EN BRYSTFORSTØRRELSE varer ca. en til to timer, og du kan som regel komme hjem samme dag.

Operationen

Kirurgen vil foretage et snit baseret på det, som du og kirurgen er blevet enige om. Derefter laves en lomme i brystet, hvor det valgte brystimplantat lægges ind. Når implantatet er på plads, lukkes snittet med kirurgiske tråde. Du vil være bedøvet / i narkose og vil derfor ikke være vågen på noget tidspunkt i løbet af operationen.

Opvågning i fred og ro

Efter operationen vil du ligge på klinikkens opvågningsafdeling. Du vil få tid og ro til at hvile dig og en sygeplejerske vil passe på dig indtil du tager hjem. Hvordan du føler dig, når du vågner efter operationen, er individuelt. Det er ikke usædvanligt at føle sig træt og sårbar i dagene efter operationen.

Efter operationen.

KROPPEN har brug for tid til at restituere efter operationen og din hud har brug for tid til at vænne sig til din nye bryststørrelse.

Tiden efter operationen

I løbet af 1-2 uger efter din operation, bør du være i stand til at vende tilbage til lettere aktiviteter efter aftale med din plastikkirurg, som vil give dig klinikkens anbefalinger. En god kompressions-BH vil være god i begyndelsen for at give en god støtte efter operationen. I den første tid vil brysterne oftest føles ømme og være hævede. Selve helingsprocessen vil være forskellig fra person til person. Lyt derfor til din krop og anbefalinger fra kirurgen og mærk efter hvad du har energi til.

Tilbage til klinikken

Normalt bliver du fulgt af klinikken efter operationen. Forhør dig derfor om klinikkens rutiner. Hvis du har tanker eller bekymringer efter operationen eller hvis du oplever problemer, er det en god ide at kontakte klinikken.



Hvilke spørgsmål bør du stille?

Tryk og informeret

Når du møder kirurgen, vil I sammen gennemgå det som du har brug for at vide før operationen. Her er eksempler på nogle spørgsmål, som du kan stille under konsultationen for at sikre at du føler dig tryk ved kirurgen, klinikken og dine valg.

1. Er du godkendt plastik kirurg, og hvor mange brystforstørrelser laver du hvert år?
2. Hvilke risici og komplikationer er forbundet med operationen?
3. Hvilke muligheder findes for mig før operationen?
4. Har du før- og efterbilleder, som jeg kan se?
5. Hvilken form, størrelse, overfladetekstur, placering og snit vil du anbefale mig?
6. Kan jeg få lavet en mamмоgrafi når jeg har fået mit bryst implantat?
7. Hvordan kan jeg forvente at implantatet vil se ud og føles efter 10 år?
8. Hvilket implantat har de bedste kliniske resultater efter 10 år?
9. Hvilke garantier har klinikken og implantaterne, som I anbefaler?
10. Hvilke efterkontroller og undersøgelser er inkluderet efter min operation?

Et naturligt resultat



MENTORS dråbeformede implantat - Contour Profile Gel - er resultatet af 10 års innovation og forskning.¹ De er udviklet til at bevare formen og give brysterne et naturligt udseende.

MENTOR® CPG silikoneydt implantat

- Giver brysterne et naturligt udseende
- Siltex®mikrotekstureret overflade
- Markedsledende i Norden indenfor brystrekonstruktion²
- Markedsledende globalt og i Danmark indenfor brystforstørrende operationer
- Lav risiko for ruptur, kapselkontraktion og rotation³



Rundt implantat med glat overflade



Rundt implantat med mikro-tekstureret overflade

Brystimplantat af højeste kvalitet

Gennem mere end 35 år har Mentor været kendt som en af verdens ledende producenter af brystimplantater af høj kvalitet. Mentor tilbyder både runde og dråbeformede (anatomisk formede) implantater i forskellige størrelser. Implantaterne er fyldt med en unik, patentbeskyttet silikonegel; MemoryGel. MemoryGel er en kohæsiv gelatine-lignende substans som fungerer som et fast, ikke flydende, materiale. MemoryGel føles som naturligt brystvæv og giver et optimalt æstetisk resultat.

Hvad er afgørende for dit resultat

Ved konsultationen får du information om de forskellige muligheder som passer bedst til dig:

- Implantatets størrelse, målt i kubikcentimeter (cc).
- Hvilken type overfladestruktur implantatet skal have: glat eller mikrotekstureret?
- Implantatets profil, defineret ved hvor meget implantatet fylder ud fra brystvæggen.
- Implantatets form, rundt eller anatomisk.

Din sikkerhed i fokus.

MENTOR tilbyder branchens mest omfattende produktgaranti for brystoperationer – Mentor Promise¹. Med denne garanti kan du føle dig tryk ved implantatets kvalitet.

Dette er Mentor Promise:



En gratis og automatisk tilmelding til garantiprogrammet



Gratis produkt livstidserstatning af implantater ved ruftur²



Op til €1000 i finansiel kompensation³ ved ruftur som skyldes produktfejl



Produkterstatning ved kapselkontraktur, dobbeltkapsel og seroma siden 2017⁴



Mulighed for gratis kontralateralt implantat efter operation fra 2017




Mere information

Ved konsultationen på klinikken bør du benytte lejligheden til at spørge til Mentors garantier og hvilke garantier klinikken evt. selv tilbyder.



Brystets anatomi

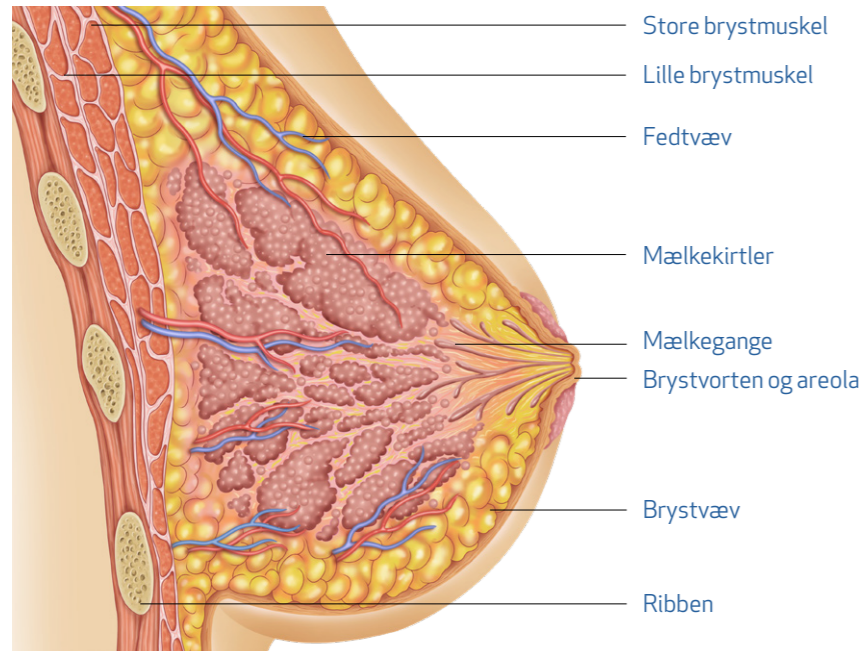


En krop i forandring

Ved udformningen af vores silikonegelfyldte implantater, har vi gjort vores bedste for at efterligne den naturlige følelse af brystvæv. Det som giver brystet både form og følelse er mælkegange og kirtler omgivet af fedtvæv. Faktorer som kan påvirke brysternes form, er graviditet, hurtigt vægttab og tyngdekraften.

Brystforstørrelse tilpasset kroppen

Brystimplantater bruges til at forstørre brysterne. Implantaterne alene vil ikke altid kunne løfte eller korrigere brystet i tilstrækkelig grad. Hvis du vil se en større ændring, kan du snakke med kirurgen om mulighed for, for eksempel et brystløft eller supplement med fedttransplantation med eget fedt.

Dine muligheder

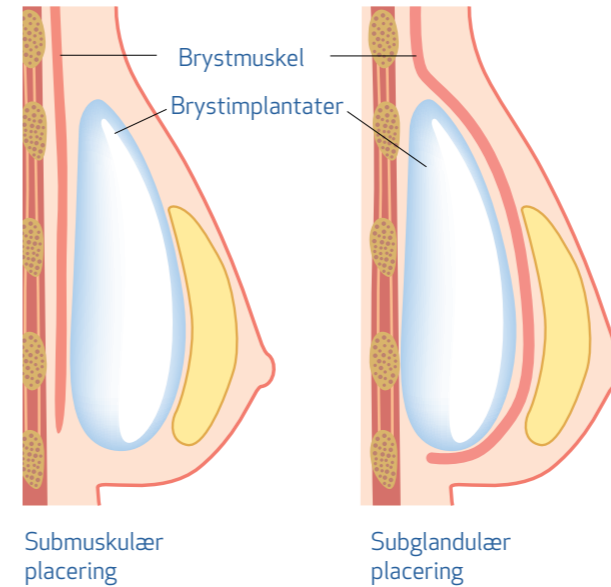


Under eller over musklen

Implantater placeres enten under brystmusklen (submuskulært) eller over brystmusklen og under mælkekirtlerne (subglandulært). Placeringen under musklen kan mindske risikoen for at implantatet kan føles gennem huden og for at arvæv skal blive hårdt. Brysterne bliver lettere at undersøge ved mammografi. Rekonvalescenstiden kan være noget længere end ved placering over brystmusklen. Ved placeringen over musklen kan implantatets kanter i sjældne tilfælde være synlige under huden. Mammografiundersøgelse kan være vanskeligere med placering over brystmusklen, mens rekonvalescenstiden vil være en smule kortere ved denne placering.

Placering af snittet

Kirurgen vælger oftest at lægge snittet til implantatet i et af følgende tre steder:

- Under armen (aksillært) – Et snit som er mere skjult, men som ikke anbefales af alle kirurger. Lyt derfor til kirurgens anbefalinger.
- Rundt brystvorten (periareolært) – Øger risikoen for ammeproblemer i forhold til andre alternativer. Lyt derfor til kirurgens anbefalinger.
- Under brystet (inframammært) – Den hyppigste placering af snittet, som anbefales af de fleste plastikkirurger.

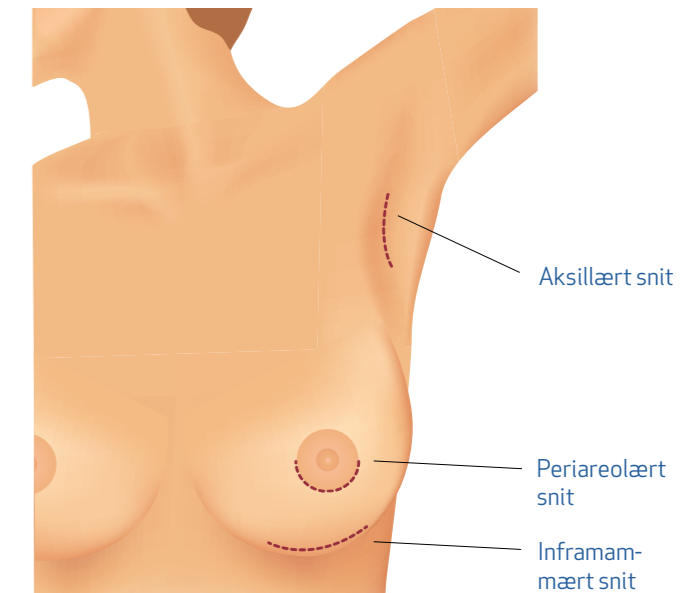

”

Implantaterne føles så fine – jeg ville have valgt præcist det samme igen.

Camilla Om sine Mentor-implantater

Succeshistorier

Beslutningen om brystoperation

Alex besluttede sig for en brystoperation efter hun havde født.

– Jeg har ønsket det så længe jeg kan huske, men jeg tog først beslutningen efter jeg havde fået mine tre børn. Jeg følte mig tryk og godt informeret, da jeg havde snakket med flere forskellige kirurger og jeg havde en god kemi med den kirurg, som jeg valgte. Ved første konsultation ønskede jeg at få at vide hvordan jeg skulle vælge det rigtige implantat, størrelse, information om evt. sygefravær, hvor mange smerter jeg kunne forvente og hvor snittet skulle lægges. Kirurgen gav mig virkelig gode svar og jeg er meget tilfreds, siger Alex.

Et nyt forsøg

Camilla, som fik en brystforstørrende operation med Mentor-implantater for ca. 4 år siden, havde brystimplantater fra en tidligere brystforstørrende operation.

– Mine implantater var for store, og jeg har haft lyst til at gøre noget med dem siden jeg fik dem for elleve år siden. En af mine bekendte anbefalede en klinik som jeg kontaktede. Kirurgen på klinikken var lydhør. Han fortalte om Mentors implantater, og anbefalede mig de dråbeformede implantater. Jeg er virkelig tilfreds. Dette er et meget bedre resultat end det, jeg havde. Implantatet føles rigtigt, og jeg ville vælge præcist det samme igen, siger Camilla.

Studier

BIA-ALCL

Mentors implantater er de eneste implantater i Danmark, som også anvendes i USA (US-FDA godkendte) pga. deres niveau af sikkerhed og kvalitet.¹ I 2011 identificerede US-FDA sjældne tilfælde af BIA-ALCL. Forkortelsen står for Breast Implant Associated Large Cell Lymphoma (brystimplantat-associeret storcellet lymfom), og er en type kræft som kan opstå hos personer med brystimplantater.² De hyppigste tegn på BIA-ALCL er at brystet pludselig hæver op på grund af dannelsen af seromen (væske) rundt om implantatet.³

US-FDA har anslået at der ialt er mellem 5–10 millioner kvinder med brystimplantater i hele verden.⁴ I marts 2017 havde myndighederne i USA modtaget totalt 359 rapporter om medicinske beviser på eksistensen af BIA-ALCL. I henhold til de nyeste undersøgelserne⁵, kan kun meget få (3) af disse tilfælde knyttes til Mentor brystimplantater.

Institute of Medicine

I juni 1999 udgav National Academy Institute of Medicine en rapport med følgende konklusion: *Efter en overordnet vurdering af epidemiologiske beviser har komiteen observeret at da der er flere end 1,5 millioner voksne kvinder i alle aldre i USA med silikonebrystimplantater, forventes nogle af disse at udvikle bindevævssygdomme, kræft, neurologiske sygdomme eller andre systemiske problemer eller tilstande. Observationerne indikerer at disse sygdomme eller tilstande ikke er hyppigere hos kvinder med brystimplantater end hos kvinder uden implantater.*⁶



Stol på dine valg

NÅR DU vælger et produkt fra Mentor, ønsker vi at du skal føle dig tryk både i dit valg af implantater og ved producenten som står bag implantaterne. Her kan du lære lidt mere om Mentor og Mentors tilstedeværelse rundt omkring i verden.



10 GRUNDE TIL AT VÆLGE MENTOR

since
1969

1. LANG ERFARING

Mentor har været på markedet siden 1969, og er verdens ledende producent af brystimplantater.



6. ERFARNE PARTNERE

Vi samarbejder med kirurger fra hele verden for at udvikle innovative produkter.



2. LEVER OP TIL HØJE STANDARDER

Mentor brystimplantater er CE-mærket¹ og godkendt af USAs mad- og lægemiddelmyndighed USFDA.²



7. PÅVIST SIKKERHED

Sikkerheden til vores produkter er testet i kliniske studier hvor flere end 200.000 kvindelige patienter deltager.⁵



3. GLOBALT GODKENDT

Mentors brystimplantater er officielt godkendt i flere end 70 lande.³



8. TILFREDSE KVINDER

5–10 millioner kvinder har implantater i dag. Flere end halvdelen af implantaterne kommer fra Mentor.⁶



4. HØJESTE STANDART

Alle Mentor produkter er udviklet med de strengeste standarder for design og test.



9. MARKEDSLEDER INDENFOR REKONSTRUKTION

Mentors implantater er det førende alternativ i alle de nordiske lande indenfor brystrekonstruktion.⁷



5. LEDENDE GARANTI

Mentor tilbyder branchens mest omfattende produktgaranti for brystoperationer.⁴



10. EN DEL AF EN STOR OG TRYK FAMILIE

Mentor er en del af Johnson & Johnson – et af verdens største sundhedsvirksomheder med 125 års erfaring og tilstedeværelse i flere end 80 lande med 250 forskellige mærker.

KILDER OG KOMMENTARER

SIDE 6–7

- Mentor Worldwide LLC. MemoryGel™ Core Gel Clinical Study Final Report, April 2013
- Lacey Sischo and Patricia Yancey Martin (2015) The price of femininity or just pleasing myself? Justifying breast surgery. Gender Issues 32 (2):77-96.
- Body Image Statistics (2017) U.S. Department of Health and Human Services, PBS, National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders

SIDE 16–17

- Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (2014) (tidligere Contour Profile Gel Core Study), årlig rapport
- Mentor Norden salgstall for 2016. HINAS Sykehusinnkjøp HF
- Basert på en sammenligning av de følgende strukturerte, formede implantatene av silikongel:

http://www.mentorwwllc.com/pdf/Produwct_Ref_Guide.pdf

http://www.sebbin.com/en/women.html

http://www.eurosurgical.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/2012-Silimedcatalogue-breast.pdf

http://eurosilicone.com/pdf/Eurosilicone_Product_Catalogue_2013.pdf

http://nagor.com/pdf/Nagor_Product_Catalogue_2013.pdf Allergan Natrelle produktkatalog 11-2008 (Nedlastet 141209)

SIDE 18–19

- Basert på en garantisammenligning af disse brystimplantater: Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx, EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http://www.laboratoires-arion.com/images/arion/ ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf, Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/loE_Informati-on_engl_2015- 01.pdf, Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des IMPLANTS MAMMAIRES og La garantie premium, (nedlastet 170320)
 - Ved bekræftet ruptur (revne) eller deflation (lækage) hos et MENTOR®-bryst-implantat på grund af produktfejl som kræver kirurgi, vil Mentor uafhængigt af implantatets alder (fra 2002) tilbyde et nyt tilsvarende MENTOR® brystimplan-tat. Med vores fokus på kvalitet og innovation, kan vi tilbyde den mest generøse garantipakke.
 - Skulle erstatningskirurgi for et MENTOR® silikonegelfyldt brystimplantat være nødvendig på grund af en bekræftet ruptur som sker inden ti (10) år efter implanta-tionsdagen og berettigelse opdages og bekræftes af Mentor efter gennemførelse af vurdering og evaluering, vil MENTOR dække udgifter som ikke dækkes af forsikring, for operation anæstesi og/eller kirurgiske omkostninger direkte knyttet til revisionskirurgien op til en samlet sum på 1.000 euro. Udgifter til operation og anæstesi skal prioriteres ved udbetalingen. I sådanne tilfælde skal anmodning om økonomisk kompensation i henhold til sikkerhedsprogrammet Mentor Promise sendes direkte til din kirurg. Økonomisk kompensation indebærer ikke et lån til dig.

I tilfælde af kapselkontraktur (Baker III/IV), dobbelt kapsel eller seroma i senstadie ved bryst- forstørrelsesoperation med MENTOR® silikonegelfyldt brystimplantater, vil Men-tor levere tilsvarende erstatningsprodukt for MENTOR® silikonegelfyldt brystimplantat i en periode på op til (10) år (fra 2013) fra implantationsdagen, forudsat at det er bevist og bekræftet af Mentor efter gennemførelse af en vurdering og evaluering af al nødvendig do-kumentation. Mentor leverer en erstatning af et MENTOR®-produkt direkte til kirurgen i en hvilken som helst størrelse og model, svarende til det oprindeligt implanterede MENTOR®-produkt.

SIDE 20–21

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 24–25

- Regulatory History of Breast Implants in the U.S. (2013) https://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/implantsandprosthetics/breastimplants/ucm064461.htm (Nedlastet 170817)
- Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (2017) https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm (Nedlastet 170817)
- Clemens MW, Medeiros LJ, Butler CE, Hunt KK, Fanale MA, Horwitz S, et al. Complete Surgical Excision Is Essential for the Management of Patients With Breast Implant-Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2016;34(2):160-8. Epub 2015/12/03.doi: 10.1200/jco.2015.63.3412. PubMed PMID: 26628470; PubMed Central PMCID: PMCPMC4872006, findes online på http://www.jco.org.
- Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) In Women with Breast Implants: Preli-minary FDA Findings and Analyses (2011) https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239996.htm (Nedlastet 170817)
- Brody GS, Deapen D, Taylor CR, Pinter-Brown L, House-Lightner SR, Andersen JS, et al. Anaplastic large cell lymphoma occurring in women with breast implants: analysis of 173 cases. Plast Reconstr Surg. 2015;135(3):695-705. Epub References 2014/12/10. doi: 10.1097/prs.0000000000001033. PubMed PMID: 25490535.
- Bondurant, Ernster, Herdman (1999) Safety of Silicone Breast Implants, Washington, D.C: National Academy Press

SIDE 26-27

- Mentors saltvandsimplantater, MemoryGel silikonegelfyldte implantater, CPG-silikonegelimplantater og BECKER dobbeltlumen ekspanderbare implantater som er tilgængelige til salg i EMEA-regionen er CE-mærket.
 - Mentor-implantater som er godkendt af FDA er Mentor saltvandsimplantater, MemoryGel silikonegelfyldte implantater og CPG silikonegelfyldte implantater som er tilgængelig for salg på det amerikanske markedet.
 - Mentor Worldwide LLC, Internal data, Global Sales Figures (2015)
 - Basert på en garantisammenligning af disse brystimplantater: Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breastenhancement/Pages/warranty.aspx, EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http://www.laboratoires-arion.com/images/arion/ ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf, Polytech:http://www.polyte- chhealth.info/images/pdf/loE_Informati-on_engl_2015-01.pdf, Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des IMPLANTS MAM- MAIRES og La garantie premium, (nedlastet 170320)
 - Institute of Medicine, National Academy of Medicine (2007) Information for women about safety of silicone breast implants.
 - Mentor Worldwide LLC. Salgsdata for Mentor Worldwide
 - Mentor Norden salgstal for 2016. HINAS Sykehusinnkjøp HF

Vigtig information

SIDE 28–29

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 30–31

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 32–33

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 34–35

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 36–37

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 38–39

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 40–41

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 42–43

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 44–45

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 46–47

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 48–49

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 50–51

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 52–53

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 54–55

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 56–57

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 58–59

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 60–61

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 62–63

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 64–65

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 66–67

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 68–69

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 70–71

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 72–73

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 74–75

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 76–77

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

SIDE 78–79

- Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.



PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



Du er velkommen til at kontakte Mentors
danske distributør

NOSCOMED MEDICAL SUPPLY A/S

Svanemøllevvej 11

2100 København Ø

Direkte: +45 36306444

Mail: noscomed@noscomed.com

Læs mere om Mentor brystimplantater:

www.mentorimplants.dk