

CONICAL ACTIVE

Connessione conica con
esagono interno



MADE IN ITALY

ESPERIENZA & QUALITÀ PUNTI DI FORZA

Qualità impeccabile


L'intero processo di gestione del prodotto, dalla progettazione e produzione, fino ad arrivare alla distribuzione, è regolato da un sistema di controllo della qualità certificato dalla marcatura CE 0425 e pienamente conforme agli standard della UNI ISO 13485:2021.



Trattamento superficiale

La superficie degli impianti a contatto con l'osso viene sottoposta a sabbatura e mordenatura, al fine di migliorare le caratteristiche biomeccaniche dell'impianto.

Questo duplice trattamento ha lo scopo di generare uno strato macrorugoso dovuto alla sabbatura, mentre l'azione dell'acido provoca la formazione di microalveoli, cavità di dimensioni paragonabili a quelle degli osteociti, che facilitano il processo di osteointegrazione una volta impiantato il dispositivo.

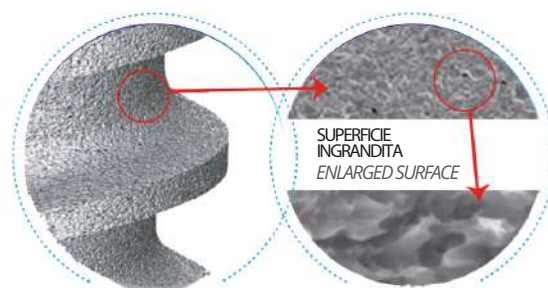

98,2%

Tasso di successo

Il tasso di successo degli impianti MaCo Dental Care è uno dei più alti del settore e testimonia l'affidabilità delle nostre linee impiantari.

CARATTERISTICHE IMPIANTO


Impianto tronco conico con connessione conometrica 8°
con vite di fissaggio, ed esagono antirotazionale



- Platform switching: unica piattaforma per tutti i diametri implantari.
- La connessione conometrica impedisce la percolazione batterica
- La presenza della doppia spira assicura un'ottima stabilità e riduce lo stress nella zona coronale.
- Spira principale aggressiva, con passo di 1,2mm, con doppio principio di avvitamento per una stabilità primaria assicurata, anche in osso tipo D4.
- Impianto sommerso bifasico



TABELLA IMPIANTI

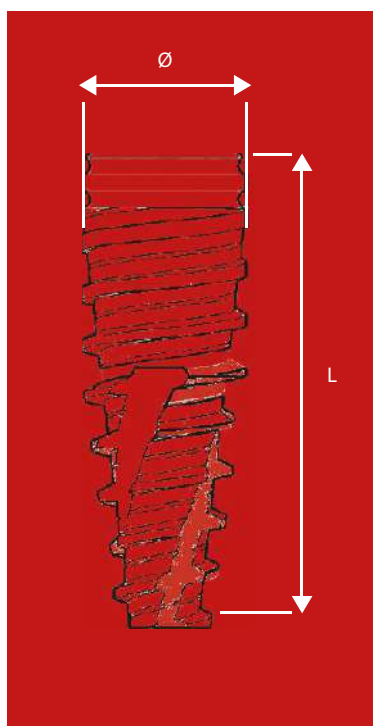

CONICAL ACTIVE **Short**



Gli impianti Conical Active da 6mm presentano un profilo a piattaforma in grado di garantire una superficie di contatto osso-impianto notevole, nonostante la lunghezza ridotta.

Ø 3,5	L	COD
	6 mm Short	ICA000
	8,0 mm	ICA001
	10 mm	ICA002
	11,5 mm	ICA003
	13 mm	ICA004
	16 mm	ICA005

Ø 3,9	L	COD
	6 mm Short	ICA006
	8,0 mm	ICA007
	10 mm	ICA008
	11,5 mm	ICA009
	13 mm	ICA010
	16 mm	ICA011

Ø 4,4	L	COD
	6 mm Short	ICA012
	8,0 mm	ICA013
	10 mm	ICA014
	11,5 mm	ICA015
	13 mm	ICA016
	16 mm	ICA017

Ø 5,5	L	COD
	6 mm Short	ICA018
	8,0 mm	ICA019
	10 mm	ICA020
	11,5 mm	ICA021
	13 mm	ICA022


PROTOCOLLO CHIRURGICO

Il protocollo chirurgico Conical Active prevede l'uso iniziale della fresa lancia (LD) e, successivamente, delle frese calibrate per altezza. L'impianto Conical Active è autofilettante, quindi, il protocollo richiede la sottopreparazione dell'osso che, come noto, può presentarsi con quattro differenti tipi di resistenza (D1, D2, D3 o D4). Si consiglia di valutare anche la consistenza dell'osso corticale, per preparare il quale si possono utilizzare le frese crestali (countersink) specifiche per tutti i diametri disponibili.


Una volta terminata l'operazione di fresatura si può procedere all'inserimento dell'impianto, utilizzando gli appositi trasportatori (Implant driver), innestabili direttamente sull'impianto; a seconda delle specificità del caso, è possibile decidere di operare con quelli manuali (adattabili anche al cricchetto fisso/dinamometrico) o con quelli per micromotore, facendo attenzione a non superare un torque di 50Ncm.

PROTOCOLLO CONSIGLIATO

TIPO D1 - D2 / D1 - D2 TYPE

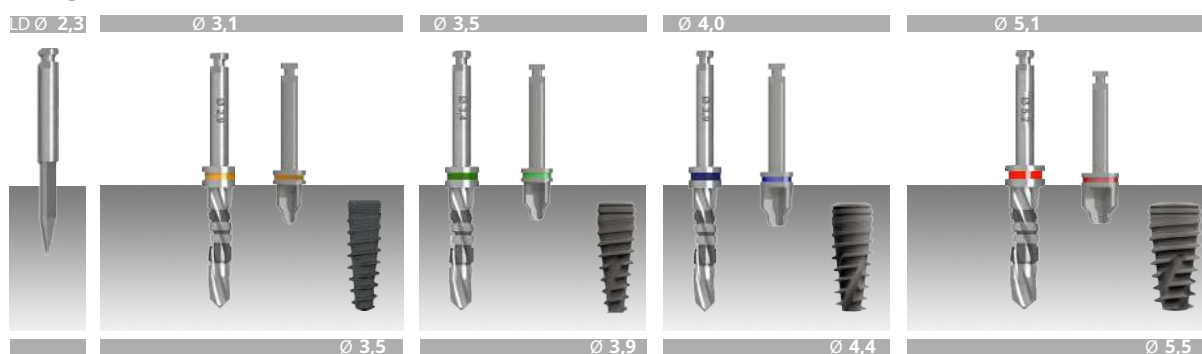


TIPO D3 - D4 / D3 - D4 TYPE

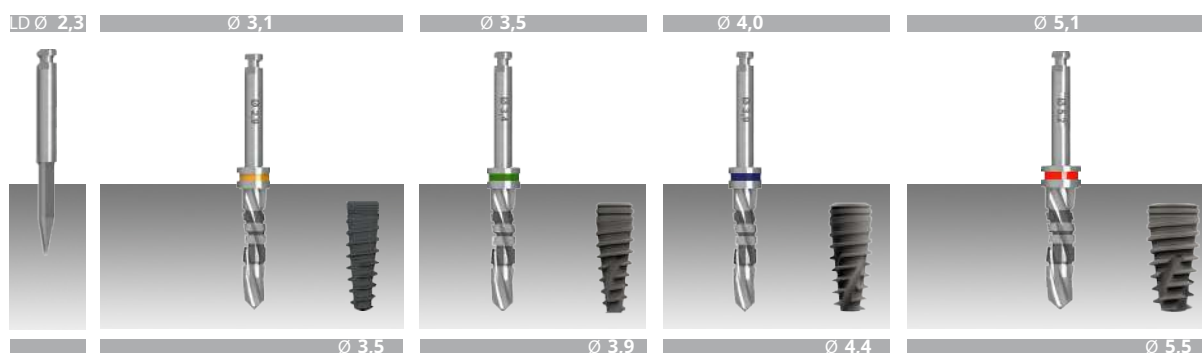


VITI DI GUARIGIONE

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

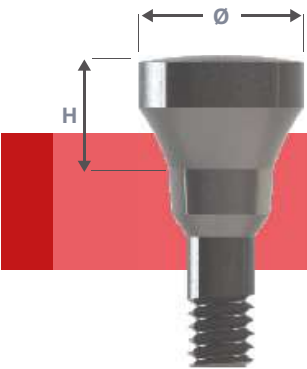


ANATOMICHE / ANATOMICS

H	COD	Ø 4,00
0,7 mm	VGCA001	
1,5 mm	VGCA002	
3 mm	VGCA004	
5 mm	VGCA006	
H	COD	Ø 5,00
0,7 mm	VGCA008	
1,5 mm	VGCA009	
3 mm	VGCA011	
5 mm	VGCA013	

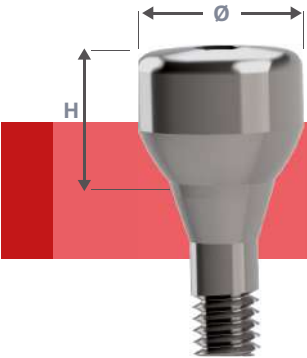

STANDARD / STANDARD

H	COD	Ø 4,00
0,7 mm	VGCA041	
1,5 mm	VGCA042	
3 mm	VGCA044	
5 mm	VGCA046	
H	COD	Ø 5,00
0,7 mm	VGCA048	
1,5 mm	VGCA049	
3 mm	VGCA051	
5 mm	VGCA053	

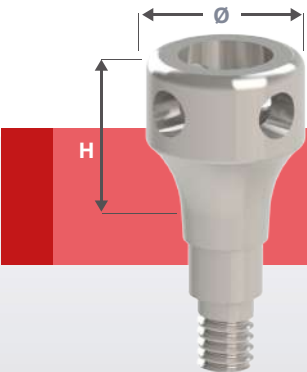


SUTURABILI / SUTURABLES

H	COD	Ø 5,00
4 mm	VGCA021	
5 mm	VGCA022	
6 mm	VGCA023	

MONCONI DRITTI

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

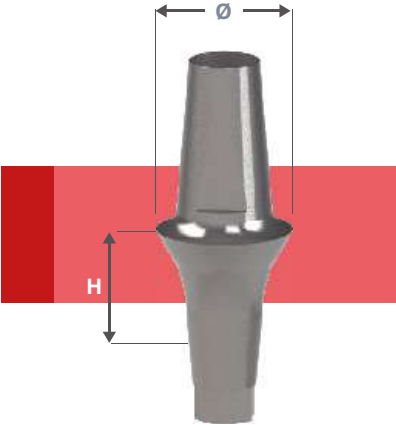

CON SPALLA / WITH SHOULDER

H	COD	Ø 4,00
0,7 mm	MDCA001	
1,5 mm	MDCA002	
3 mm	MDCA003	
5 mm	MDCA004	
H	COD	Ø 5,00
0,7 mm	MDCA006	
1,5 mm	MDCA007	
3 mm	MDCA008	
5 mm	MDCA009	




SENZA SPALLA / WITHOUT SHOULDER

COD
MDCA022

MONCONI ANGOLATI

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

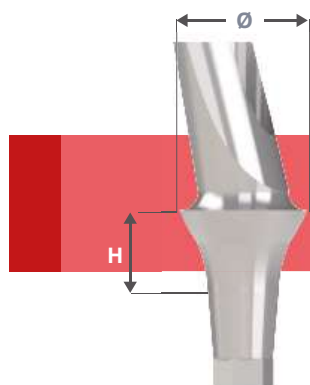

ANGOLATI 15° CON SPALLA
15° ABUTMENT WITH SHOULDER

H	COD
0,7 mm	MQCA000
1,5 mm	MQCA001
3 mm	MQCA003
5 mm	MQCA005

Ø 4,00


H	COD
0,7 mm	MQCA006
1,5 mm	MQCA007
3 mm	MQCA009
5 mm	MQCA011

Ø 5,00



ANGOLATI 15° SENZA SPALLA
15° ABUTMENT WITHOUT SHOULDER

COD
MQCA022

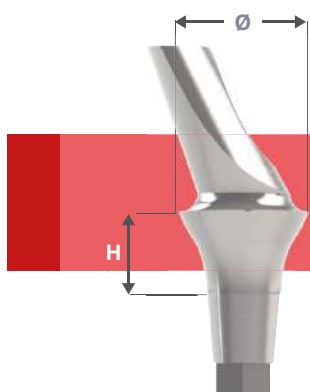

ANGOLATI 25° CON SPALLA
25° ABUTMENT WITH SHOULDER

H	COD
0,7 mm	MVCA000
1,5 mm	MVCA001
3 mm	MVCA003
5 mm	MVCA005

Ø 5,00




ANGOLATI 25° SENZA SPALLA
25° ABUTMENT WITHOUT SHOULDER

COD
MVCA022



MONCONI A SFERA ED EMISFERICI

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

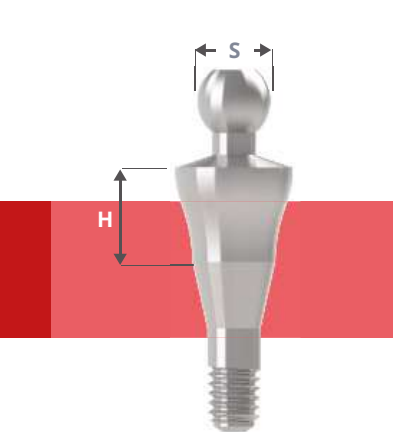


MONCONI A SFERA SPHERICAL ATTACHMENTS

S = 2,5mm	
H	COD
0,7 mm	MOCA001
1,5 mm	MOCA002
3 mm	MOCA003
5 mm	MOCA004

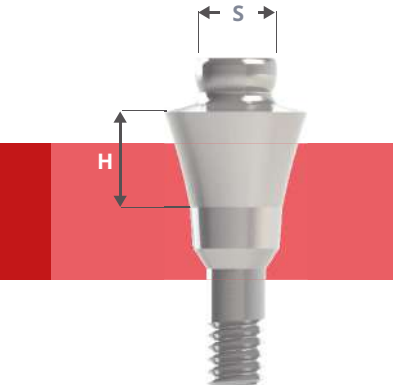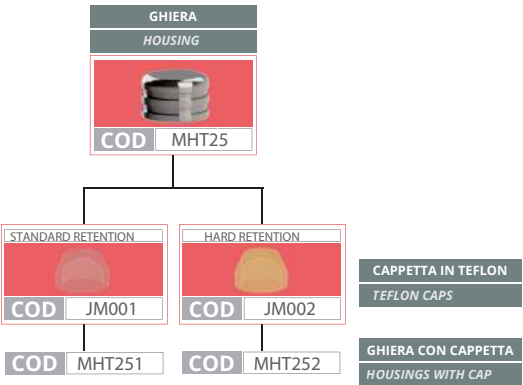


MONCONI EMISFERICI HEMISPHERICAL ATTACHMENTS

S = 2,5mm	
H	COD
1,5 mm	MOCA021
3 mm	MOCA022
5 mm	MOCA023

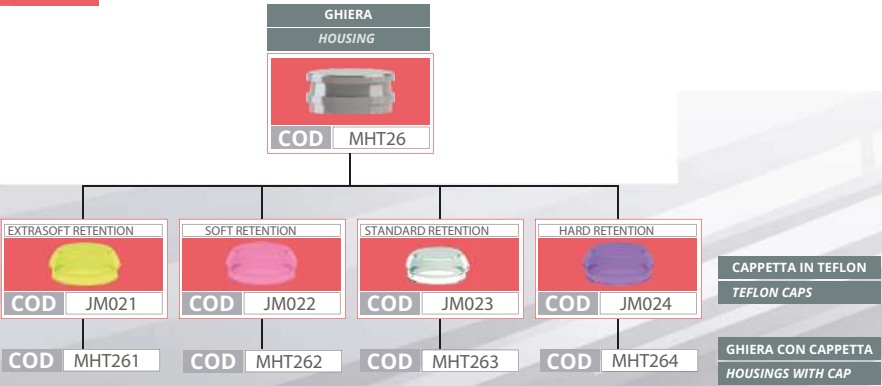


MONCONI MULTI-UNITÀ (MUA)

Materiale: TITANIO Gr. 5 - Ti AL6V4 ELI (moncone, torretta, analogo, tappo di guarigione, z-base, transfer, scan abutment) POM-C/RESINA ACETALICA (calcinabile)

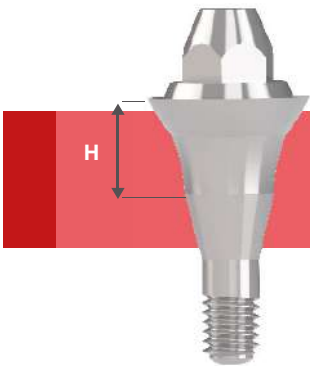

MUA DRITTI / STRAIGHT ABUTMENTS

H	COD
0,7 mm	MUCA001
1,5 mm	MUCA002
3 mm	MUCA003
5 mm	MUCA004

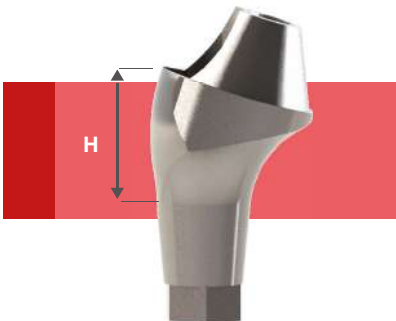

MUA ANGOLATI 17°
17° ANGULATED ABUTMENTS

H	COD
2 mm	MUCA172
3 mm	MUCA173

MUA ANGOLATI 30°
30° ANGULATED ABUTMENTS

H	COD
3 mm	MUCA303
4 mm	MUCA304

ACCESSORI PER MULTI-UNITÀ / MULTI-UNIT ACCESSORIES

titanium turrets	COD
standard turret	MPS001
standard slim turret	MPS002
slim anatomical turret	MPSA002

plastic abutments	COD
rotatory	CMU001

gasket cap	COD
standard cap	TPS001
anatomical cap	TPSA001

z-base abutments	COD
z-base abutments	ZBMU001

transfer	COD
rotatory	TIMU001


analog	COD
laboratory analog	LMU001
digital analog	LDMU001

scan abutment	COD
rotatory	SAMU001

gluing abutment	COD
standard abutment	MIMU001
anatomical abutment	MIMUA001

MONCONI PROVVISORI E FRESABILI

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

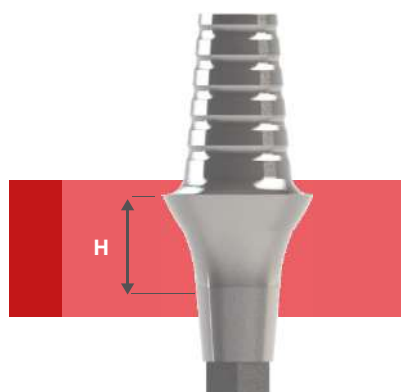

MONCONI PROVVISORI
TEMPORARY ABUTMENTS

H	COD
1,5 mm	MTCA001
3 mm	MTCA003



MONCONE FRESABILE
CUSTOMIZABLE ABUTMENT


COD
MFCA001

BASE TITANIO, SCAN ABUTMENT E MONCONI Z-BASE



CALCINABILE CON BASE TITANIO TITANIUM BASE CALCINABLES

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) -BASE
Materiale: POM-C/RESINA ACETALICA -CALCINABILE
Material: Gr. 5 Titanium (Ti AL6V4 ELI) - BASE
Material: POM-C/ACETAL RESIN

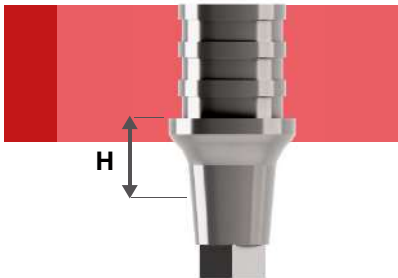

H	COD
1,5 mm	CBTCA001
3 mm	CBTCA002



SCAN ABUTMENT SCAN ABUTMENT

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



	COD
non rotante	SACA001
rotante	SARCA001



MONCONE Z-BASE NON RUOTANTE NON ROTATING Z-BASE ABUTMENTS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



H	COD
1,5 mm	ZBCA001
3 mm	ZBCA002
5 mm	ZBCA003




MONCONE Z-BASE RUOTANTE ROTATING Z-BASE ABUTMENTS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



H	COD
1,5 mm	ZBRCA001
3 mm	ZBRCA002
5 mm	ZBRCA003


LABORATORIO /

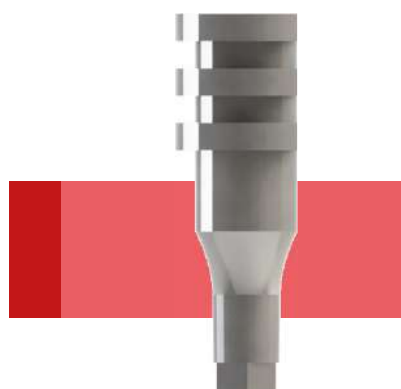

TRANSFER DA IMPRONTA TRANSFERS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

COD
TICA001

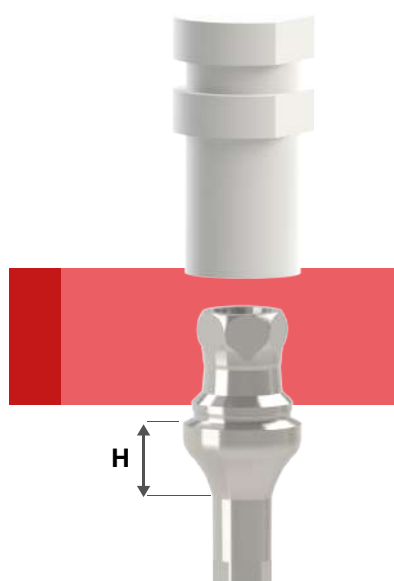

TRANSFER A STRAPPO PULL-OUT TRANSFERS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) -BASE 13
Materiale: POM-C/RESINA ACETALICA - GUAINA
Material: Gr. 5 Titanium (Ti AL6V4 ELI) -BASE
Material: POM-C/ACETAL RESIN

H	COD
1,5 mm	TSCA001
3 mm	TSCA002



ANALOGHI / ANALOGUES

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

Analoghi / Analogues	COD
Analogo da laboratorio / Laboratory Analogue	LCA001
Analogo per digitale / Analog for digital	LDCA001

KIT CHIRURGICO



COD
YCH426

● EMCA001 ESTRATTORE PER MONCONI
ABUTMENT REMOVAL TOOL

● DA022 AVVITATORE PER MULTI-UNITÀ
KEY FOR MULTI-UNIT ABUTMENTS

AVVITATORI A PUNTA ESAGONALE / SCREWDRIVERS WITH 1,2mm HEX BIT

● DCS012 AVVITATORE CORTO PER CONTRANGOLO
SHORT SCREWDRIVER FOR HANDPIECE

● DDS012 AVVITATORE CORTO PER CHIAVE
SHORT SCREWDRIVER FOR WRENCH

● DDL012 AVVITATORE LUNGO PER CHIAVE
LONG SCREWDRIVER FOR WRENCH

DRIVER PER IMPIANTO / IMPLANT DRIVERS

● DCS011 DRIVER CORTO PER CONTRANGOLO
SHORT DRIVER FOR HANDPIECE

● DDS011 DRIVER CORTO PER CHIAVE
SHORT DRIVER FOR WRENCH

● DDL011 DRIVER LUNGO PER CHIAVE
LONG DRIVER FOR WRENCH

● FPR001 PROLUNGA PER MANIPOLO
HANDPIECE EXTENDER

FRESE LANCIA / LANCE DRILLS

● FP004 FRESA LANCIA Ø 2,3mm
LANCE DRILL Ø 2,3mm

FRESE / DRILLS

● FIN035 FRESA Ø 3,1mm
DRILL Ø 3,1mm

● FIN036 FRESA Ø 3,5mm
DRILL Ø 3,5mm

● FIN037 FRESA Ø 4,0mm
DRILL Ø 4,0mm

● FIN038 FRESA Ø 5,1mm
DRILL Ø 5,1mm

COUNTERSINKS (PREPARATORI DI SPALLA)
TAPPING TOOLS FOR TORQUE WRENCH

● MADCA001 COUNTERSINK Ø 3,5mm
TAPPER Ø 3,5mm

● MADCA002 COUNTERSINK Ø 3,9mm
TAPPER Ø 3,9mm

● MADCA003 COUNTERSINK Ø 4,4mm
TAPPER Ø 4,4mm

● MADCA004 COUNTERSINK Ø 5,5mm
TAPPER Ø 5,5mm

● KD004 CHIAVE DINAMOMETRICA 10-45 Ncm
DYNAMOMETRIC WRENCH 10-45 Ncm

KIT CHIRURGICO

KIT STOP PER FRESE

STOP PER FRESE Ø 2,4 - Ø 2,9 - Ø 3,4
STOPPERS FOR Ø 2,4 - Ø 2,9 - Ø 3,4 DRILLS

- FST021 STOP A 6mm
6mm STOPPER
- FST022 STOP A 8,5mm
8,5mm STOPPER
- FST023 STOP A 10mm
10mm STOPPER
- FST024 STOP A 11,5mm
11,5mm STOPPER
- FST025 STOP A 13mm
13mm STOPPER

STOP PER FRESE Ø 3,9 - Ø 4,7 - Ø 5,2
STOPPERS FOR Ø 3,9 - Ø 4,7 - Ø 5,2 DRILLS

- FST026 STOP A 6mm
6mm STOPPER
- FST027 STOP A 8,5mm
8,5mm STOPPER
- FST028 STOP A 10mm
10mm STOPPER
- FST029 STOP A 11,5mm
11,5mm STOPPER
- FST030 STOP A 13mm
13mm STOPPER



COD
YCH030

KIT PER CHIRURGIA GUIDATA

- FMU004 MUCOTOMO
MUCOTOME
- FCS010 COUNTERSINK
COUNTERSINK
- FPS003 FRESA LANCIA CORTA
SHORT LANCE DRILL
- FPS004 FRESA LANCIA LUNGA
LONG LANCE DRILL
- FPR001 PROLUNGA PER MANIPOLO
HANDPIECE EXTENDER

- FCG2806 - FCG2813 5 FRESE FINALI Ø 2,8mm
5 FINAL DRILLS Ø 2,8mm
- FCG3206 - FCG3213 5 FRESE FINALI Ø 3,2mm
5 FINAL DRILLS Ø 3,2mm
- FCG3606 - FCG3613 5 FRESE FINALI Ø 3,6mm
5 FINAL DRILLS Ø 3,6mm
- FCG4006 - FCG4013 5 FRESE FINALI Ø 4,0mm
5 FINAL DRILLS Ø 4,0mm

- FPP001 FRESA PER PIN DI ANCORAGGIO
DRILL FOR ANCHOR PIN
- PIN001 3 PIN DI ANCORAGGIO PER DIMA
3 ANCHOR PIN FOR GUIDE
- KD004 CHIAVE DINAMOMETRICA 10-45 Ncm
DYNAMOMETRIC WRENCH 10-45 Ncm
- DA022 AVVITATORE PER MULTI-UNITÀ
KEY FOR MULTI-UNIT ABUTMENTS
- DDCG011 DRIVER IMPIANTARE DA CHIAVE PER CHIRURGIA GUIDATA
IMPLANT DRIVER FOR WRENCH
- DCCG011 DRIVER IMPIANTARE DA CONTRANGOLO PER CHIRURGIA GUIDATA
IMPLANT DRIVER FOR HANDPIECE
- EMCA001 ESTRATTORE PER MONCONI
ABUTMENT REMOVAL TOOL
- DDS012 AVVITATORE CORTO PER CHIAVE
SHORT SCREWDRIVER FOR WRENCH



COD
YCH426-CA

MaCo
DENTAL CARE

DISTRIBUITO DA:

www.macodentalcare.com
info@macodentalcare.com



CE 0425